



MIRE EL VIDEO SOBRE
LAS REGLAS DE USO DEL DISPOSITIVO



For more information about how this device works, visit:

WWW.FROGGYMOUTH.COM



Lea atentamente las instrucciones del prospecto incluido con el dispositivo médico.
FROGGYMOUTH – Dispositivos Médicos de Clase I – CE
Biotech Dental Smilers – 305 Allées de Craponne – 13300 Salon-de-Provence, Francia

FRO-DE-1-ES_Rév00_06/2025



FROGGYMOUTH

**CORRIGE LA DEGLUCIÓN Y
POSTURA DE LA LENGUA EN**

15 minutos al día

Instrucciones para pacientes adolescentes y adultos

SE LE HA **RECOMENDADO** UN FROGGY MOUTH

Este dispositivo corrige la función de la deglución al crear un nuevo patrón deglutorio: durante la deglución, los dientes entran en contacto suavemente y la lengua empuja contra el paladar.



Su profesional le ha entregado un **Froggy Mouth**



Deje atrás los malos hábitos



Con un enfoque muy **sencillo**



En tan solo **15 minutos** al día, mientras mira la TV



Todas estas condiciones clínicas tienen algo en común: todas están relacionadas, de diferentes maneras, con la postura de la lengua. En la actualidad, 1/3 de la población sufre alguna de estas disfunciones.

Al corregir la disfunción de la deglución, Froggy Mouth ayuda a:


- Reducir **la duración del tratamiento**
- Mejorar **la calidad de los resultados**
- Reducir **el riesgo de recaída**

Froggy Mouth es compatible con el resto de aparatología ortodóncica (dispositivos removibles o alineadores, por ejemplo).



¿CÓMO **FUNCIONA** FROGGY MOUTH?

El dispositivo Froggy Mouth debe usarse 15 minutos al día mientras mira la TV. Mientras el paciente utiliza el dispositivo, el patrón de deglución cambia automáticamente sin interrumpir la calidad del sueño, lo que es muy importante.

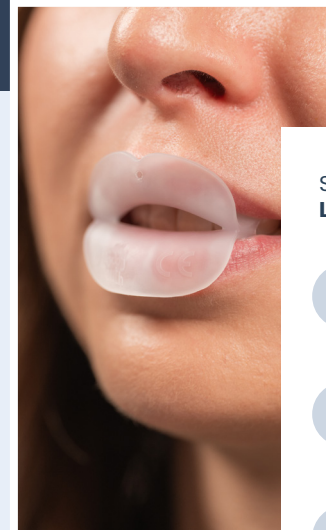

SIGA CUIDADOSAMENTE LAS REGLAS DE USO DEL FROGGY MOUTH



Debe utilizarse **15 minutos** al día para adoptar rápida y eficazmente una nueva forma de tragar. **Seguir esta rutina es esencial.**



Utilícelo mientras mira **la televisión** o al estar frente a la computadora. De esta forma garantizará que el plano visual horizontal no se altere y se eviten las posturas en las que es posible inclinar la cabeza.



El paciente debería mantener **su atención en la pantalla** a fin de que la nueva forma de tragar se adopte automática y naturalmente.

3 CLAVES PARA RECORDAR



Es normal experimentar un aumento de saliva cuando se utiliza el dispositivo, especialmente durante los primeros días de uso; si esta situación perdura más de **10 días** informe a su profesional.



Durante el día, preste atención a los siguientes y aspectos y comporta su experiencia con el especialista :

La postura de su lengua en reposo,
La relajación de su cuello y hombros,
Las mejoras en la calidad de su sueño



Si extrae empiece el de dispositivo nuevo. de su boca durante el período de 15 minutos, **empiece de nuevo.**



CÓMO LIMPIAR EL DISPOSITIVO

Limpie el dispositivo con su cepillo y pasta de dientes. Séquelo completamente y vuelva a guardarlo en su caja.

