



MIRE EL VIDEO SOBRE
LAS REGLAS DE USO DEL DISPOSITIVO



For more information about how this device works, visit:

WWW.FROGGYMOUTH.COM



Lea atentamente las instrucciones del prospecto incluido con el dispositivo médico.
Froggymouth – Dispositivos Médicos de Clase I – CE
Biotech Dental Smilers – 305 Allées de Craponne – 13300 Salon-de-Provence, Francia

PRO-DE-ES_Rév00_06/2025



FROGGYMOUTH

**CORRIJA LA FUNCIÓN DE DEGLUCIÓN Y
LA POSICIÓN DE LA LENGUA EN TAN
solo 15 minutos al día**

Instrucciones para el joven paciente

SE LE HA **PRESCRITO** UN FROGGYMOUTH

Froggymouth es un dispositivo que corrige la función de deglución creando un nuevo patrón: durante la deglución, los dientes entran ligeramente en contacto con los labios y la lengua se sitúa en el paladar.



Su profesional le ha entregado un **Froggymouth**




Deje atrás los malos hábitos



Con un enfoque muy **sencillo**



En tan solo **15 minutos** al día, mientras mira la TV

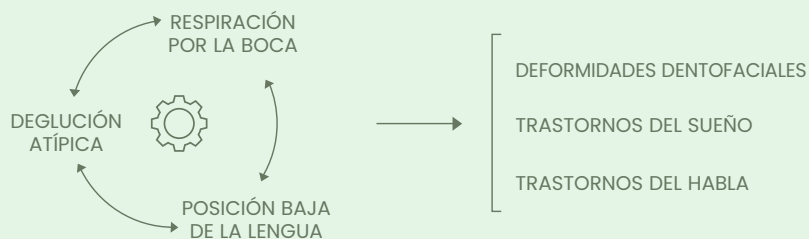

Todos estos problemas clínicos tienen un elemento en común: están relacionados, de diferentes maneras, con la posición de la lengua. De hecho, el 40 % de la población puede seguir experimentando una deglución atípica con interposición de la lengua incluso después de que ya hayan salido los primeros molares. Este hecho da lugar a una mala función lingual y a una alteración de las funciones orofaciales que acaban afectando al crecimiento óptimo. Al corregir la disfunción de la deglución, Froggymouth contribuye a:

- Reducir **la duración del tratamiento**
- Mejorar **la calidad de los resultados**
- Reducir **el riesgo de recaída**



¿CÓMO **FUNCIONA** FROGGYMOUTH?

El dispositivo Froggymouth debe usarse 15 minutos al día mientras mira la TV. Mientras el niño utiliza el dispositivo, el patrón de deglución cambia automáticamente sin interrumpir la calidad del sueño, lo que es muy importante.



SIGA CUIDADOSAMENTE LAS REGLAS DE USO DEL FROGGYMOUTH



Debe utilizarse **15 minutos** al día para adoptar rápida y eficazmente una nueva forma de tragar. **Seguir esta rutina es esencial.**



Utilícelo mientras mira **la televisión** o al estar frente a la computadora. De esta forma garantizará que el plano visual horizontal no se altere y se eviten las posturas en las que es posible inclinar la cabeza.



El paciente debería mantener **su atención en la pantalla** a fin de que la nueva forma de tragar se adopte automática y naturalmente.

3 CLAVAS PARA RECORDAR



Es normal experimentar un aumento de saliva cuando se utiliza el dispositivo, especialmente durante los primeros días de uso; si esta situación perdura más de **10 días** informe a su profesional.



Debe utilizar el dispositivo **TODOS** los días.



Si extrae empiece el dispositivo nuevo. de su boca durante el período de 15 minutos, **empiece de nuevo.**



CÓMO LIMPIAR EL DISPOSITIVO

Limpie el dispositivo con su cepillo y pasta de dientes. Séquelo completamente y vuelva a guardarlo en su caja.

