


Kontakt™ PL

La armonía perfecta
entre biología y estética

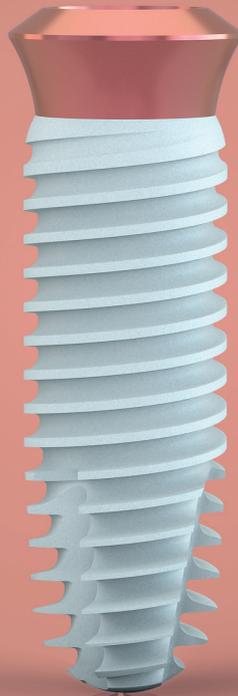

BIOTECH DENTAL

UNOS CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS DE MÁS DE 30 AÑOS

Respaldado por sus más de 30 años de experiencia, Biotech Dental ha desarrollado el implante Kontakt™ Perio Level en colaboración con cirujanos odontólogos para responder a las mayores exigencias clínicas, biológicas y estéticas.



FIABILIDAD Y FLEXIBILIDAD MÁXIMAS

✓ Cuello transgingival

El Kontakt™ Perio Level es un implante dotado de un cuello transgingival que facilita la cirugía en una sola fase quirúrgica. Por su anodización en rosa, ofrece una **mejor integración estética a la altura de los tejidos blandos**.

El cuello transgingival **reduce la complejidad del tratamiento y simplifica la manipulación de las piezas protésicas ayudando** a preservar la salud periimplantaria.

✓ Una conexión fiable

- El implante Kontakt™ PL está dotado de una conectividad cónica. Gracias a su importante superficie de contacto, garantiza una perfecta estabilidad de los pilares protésicos y elimina los micromovimientos.
- La indexación patentada STSystem® ofrece una fiabilidad y una seguridad máximas durante la implantación de las piezas protésicas con 3 puntos de indexación en la base de los pilares y 6 posibilidades de reposicionamiento en el implante.

✓ Un diseño y un estado de superficie implantaria eficaces

El Kontakt™ PL es un implante **cilindrocónico** en titanio de grado 4 (T60) dotado de un estado de superficie pulida y mordentada con un vértice esférico y ranuras autoperforantes. Estas características le permiten asegurar una osteointegración y una estabilidad primaria y secundaria óptimas.

✓ Vértice esférico atraumático

Gracias a su diseño, el vértice protege la estructura anatómica durante la intervención quirúrgica y permite una osteotomía menos invasiva.

2

SENCILLEZ Y FLEXIBILIDAD DEL TRATAMIENTO

UNA ÚNICA CONECTIVIDAD
PARA TODA LA GAMA
DE IMPLANTES KONTACT™ PL

> **4 perfiles de cuello:**

- S (∅ 3.8 mm)
- M (∅ 4.2 mm)
- L (∅ 4.8 mm)
- XL (∅ 6.00 mm)

> **3 diámetros** de cuerpo implantario:




> **5 longitudes:**

- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm

> **Altura del cuello de 1.6 mm**

Posibilidad de obtener implantes de **cuerpos estrechos (4.2 mm)** con perfiles de **cuello XL**.

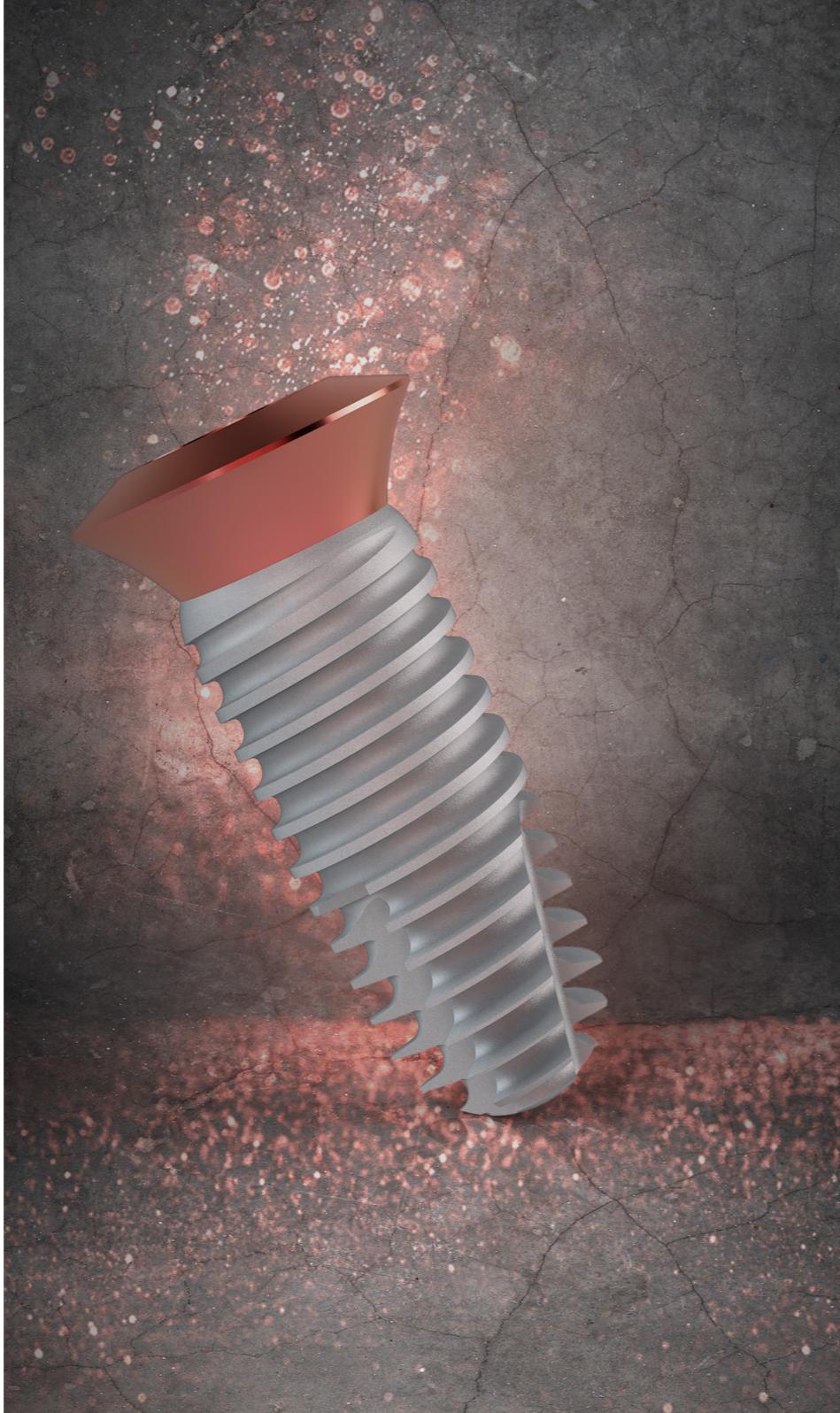

FAVORECER LA UNIÓN DE LOS TEJIDOS BLANDOS, OPTIMIZAR LA ESTÉTICA

El cuello garantiza una sujeción perfecta de la encía. Gracias a su elaborado diseño y a su superficie lisa, los tejidos se unen de manera óptima y se reduce la creación de placa dental.

El cuello anodizado rosa de una altura gingival de 1.6 mm y de diferentes anchuras (S, M, L y XL) en función de los diámetros del implante, responde así a las mayores exigencias clínicas y estéticas.

PRINCIPIOS Y VENTAJAS

El Kontakt™ PL es un implante cilindrocónico dotado de un cuello transgingival que facilita la cirugía en una sola fase quirúrgica.

Presenta las siguientes ventajas:

- ✓ **Simplifica los tratamientos de implantología:** reduciendo el número de intervenciones quirúrgicas y haciendo más accesibles los tratamientos protésicos y el mantenimiento.
- ✓ **Respeto del espacio biológico:** la presencia de la parte transgingival y su diseño permiten crear un perfil de emergencia ideal y preservar el entorno periimplantario.
- ✓ **Conectividad STSystem® común a todos los diámetros:** fiable e intuitiva, la conectividad STSystem® facilita la manipulación de las piezas protésicas y la gestión del stock.
- ✓ **Estabilidad primaria:** el diseño del implante le confiere un poder autopercutor interesante en los casos de implantación inmediata.

3

LA DIGITALIZACIÓN DE LA IMPLANTOLOGÍA EN SU FLUJO DIGITAL

- ✓ **Optimice** sus flujos digitales, su comunicación con sus pacientes y **acelere la planificación** de sus casos.
- ✓ **Facilite** sus tomas de impresiones con el escáner intraoral WOW™.


Gracias al scanbody, puede introducir de forma digital la posición, la inclinación y la orientación del implante.

Esto permite la realización de los pilares y piezas protésicas adaptadas a la perfección a la morfología del paciente.



EL ARTE DE LA CIRUGÍA GUIADA ACCESIBLE PARA TODOS

Biotech Dental combina la eficacia del implante Kontakt™ PL con la tecnología de NemoScan para permitirle **acceder a la cirugía guiada con facilidad.**

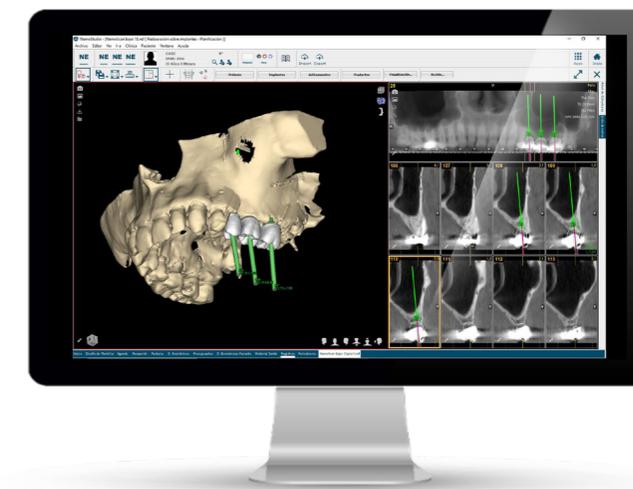

www.biotech-planningcenter.com

4

UN ÚNICO KIT DE CIRUGÍA PARA LOS IMPLANTES DE LA GAMA KONTACT™

Un kit ergonómico y sencillo que le permite colocar todos los implantes de la gama Kontakt™.



UNA GAMA PROTÉSICA COMPLETA
DESARROLLADA PARA SIMPLIFICAR
Y OPTIMIZAR SUS RESULTADOS ESTÉTICOS



SOLUCIONES PROTÉSICAS ADAPTADAS
A TODAS LAS INDICACIONES

- ✓ Prótesis cementada híbrida
- ✓ Prótesis removible
- ✓ Prótesis CAD-CAM
- ✓ Pilares de cicatrización anatómicos, personalizables y escaneables SSA-GF*

* Sealing Socket Aburment - Gingival Fit /
Pilar de cierre de encaje - ajuste gingival.



BIOTECH DENTAL
SPAIN



Biotech Dental Spain
Avenida Juan Caramuel, 1
Parque Científico Leganés Tecnológico
28919 - Leganés (Madrid) - España

Tel.: +34 911 930 210

biotech-spain@biotech-dental.com
www.biotech-dental.com



AFNOR Cert. 73017

Biotech Dental - Empresa francesa bajo la legislación francesa con un capital de 24 866 417 €.

Registro Mercantil Salon de provence: 795 001 304 - SIRET: 795 001 304 00018 - Número de IVA: FR 31 79 500 13 04.

Kontact™ / Kontact™ PL fabricado por: Biotech Dental. Dispositivos médicos (DM) de clase I, IIa y IIb. CE0459 - WOW®: fabricante Scan4all SAS. DM clase I. CE - NemoScan: fabricante Software Nemotec, S.L. DM Clase Im. CE2797. Todos estos dispositivos médicos deben ser utilizados por profesionales de la salud calificados y capacitados. Todas las marcas están bajo la responsabilidad de sus respectivos fabricantes. Leer las instrucciones cuidadosamente. No reembolsado por la seguridad social. Las imágenes son solo para fines de representación. No tirar en zonas públicas.

Impresión VALLIERE - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC des Molières - 13140 Miramas - Francia.