


Kontakt™ MB

MONOBLOCK

Optimiza el espacio biológico y
protege el complejo osteomucoso

CONCEPTO BONE & TISSUE LEVEL*


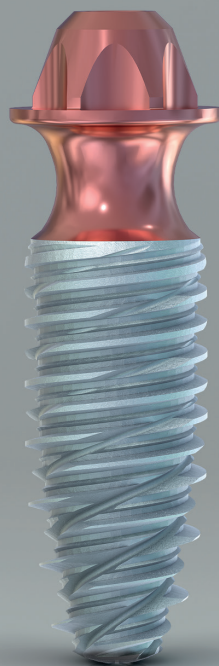


BIOTECH DENTAL

*Concepto que combina las características y beneficios de los implantes de 1 y 2 piezas.


INNOVADOR CON UNA FUERTE HERENCIA

El implante Kontakt™ MB está altamente inspirado en el implante Kontakt™. Ofrece los mismos beneficios para promover una respuesta óptima tanto del hueso como de los tejidos mucosos.

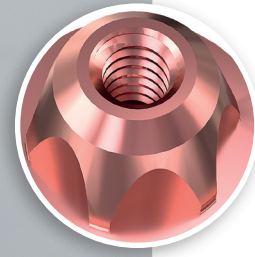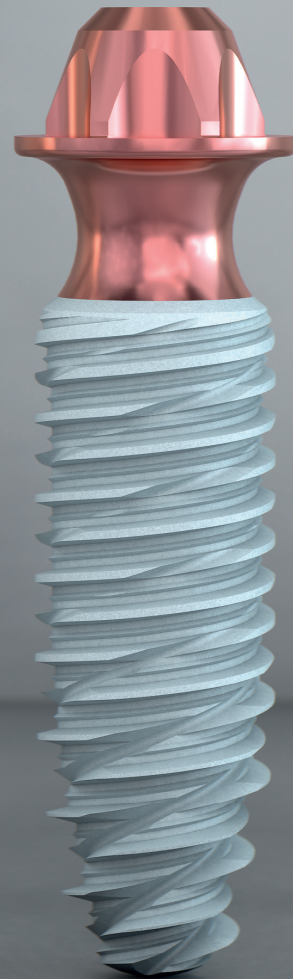


El implante Kontakt™ MB está altamente inspirado en el implante Kontakt™. Ofrece los mismos beneficios para promover una respuesta óptima tanto del hueso como de los tejidos mucosos

El implante Kontakt™ MB **cuenta con un pilar cónico universal integrado, con un diámetro estándar para prótesis atornilladas. Este diseño monobloque, sin una unión entre el implante y el pilar, evita la alteración del espacio biológico al atornillar y desatornillar durante las fases protésicas.** Todo tipo de estructuras pueden producirse en diferentes laboratorios, permitiendo también la corrección de ejes.

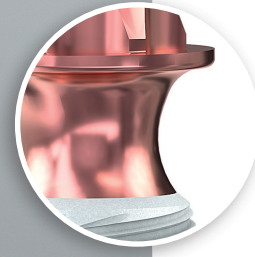

Cuello cóncavo anodizado en rosa y platform switching

Cuello anodizado en rosa para **una mejor integración estética**. El diseño cóncavo **mejora el espacio biológico** y promueve la expansión de los tejidos blandos. La ausencia de espacios evita la filtración bacteriana y la inflamación. El desplazamiento lateral del cuello, similar al platform switching (cambio de plataforma), favorece la retención o el aumento óseo en el primer contacto hueso-implante (BIC). El cuello cónico invertido del implante reduce la compresión ósea crestal. Todas estas características colocan el cuello en yuxtaposición o en posición subcrestal.

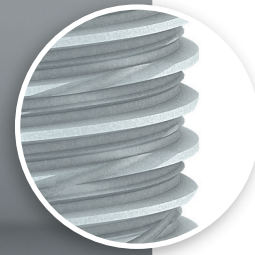

Diseño y superficie del implante de alto rendimiento

- El Kontakt™ MB es un implante cilíndrico-cónico fabricado en titanio de grado 4 (T60) con una **superficie arenada SLA y una rosca de paso variable** para una compresión óptima. Con estas características, garantiza **estabilidad primaria** y una **osseointegración óptima**.
- **Posibilidad de diámetro cónico:** la ausencia de tornillos internos en el cuerpo del implante da lugar a un diámetro diseñado para crestas estrechas, lo que limitará la necesidad de injertos óseos.



Ápice esférico atraumático

Gracias a su diseño, el apex protege la estructura anatómica durante la cirugía y permite una osteotomía menos invasiva.

2

SENCILLEZ Y FLEXIBILIDAD EN EL TRATAMIENTO

UNA SOLA CONEXIÓN PARA TODA LA GAMA DE IMPLANTES KONTACT™ MB

> 2 alturas gingivales:




> 5 diámetros de implante:



> 5 longitudes:

6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm

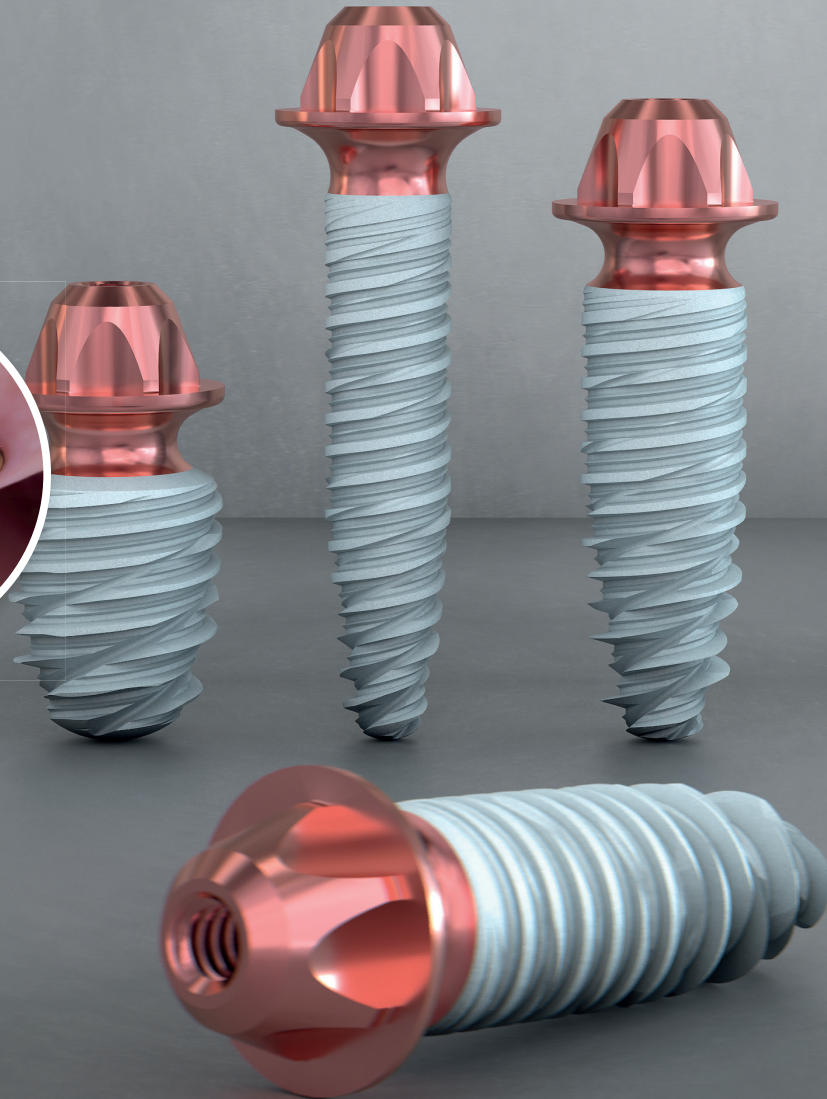

FACILITA LA ADHERENCIA DE LOS TEJIDOS BLANDOS, FACILITA LA MANIPULACIÓN PROSTÉTICA

La **forma de cuello cóncavo** y la **superficie anodizada** facilitan una adhesión óptima, estabilidad e incluso el crecimiento de los tejidos blandos^{**}. La manipulación prostética es más sencilla con la conexión de implante externo con pilar cónico (MUA^{*}).

PRINCIPIOS Y BENEFICIOS

Los implantes Kontakt™ MB están diseñados para cirugías postextracción y restauraciones atornilladas. El Kontakt™ MB BTLC (Concepto de Nivel Óseo y de Tejido) combina las características y beneficios de implantes de una pieza y de dos piezas.

- ✓ **Protección** de los **tejidos blandos y óseos periimplantarios** gracias a su diseño monobloque y su cuello transgingival liso, combinado con un sistema de desplazamiento de plataforma.
- ✓ **Accesibilidad y buena visibilidad**, especialmente en sectores posteriores, gracias a la conexión del implante con el componente cónico externo. **Tener un pilar y un implante en una sola pieza ahorra tiempo quirúrgico, reduce el número de instrumentos y mejora la ergonomía.**
- ✓ **Adaptación** a la mayoría de las restauraciones quirrgicas de una sola vez gracias a su diseño, dimensiones y superficie: restauraciones simples, múltiples o completas; en cualquier tipo de hueso y sitio (maxilar o mandibular, región posterior o anterior)^{***}. Implantación en posición alveolar postextracción o cicatrizada, con colocación inmediata o pospuesta mejora la ergonomía.
- ✓ **Óptima estabilidad diferida** gracias a su superficie microtexturizada y a su concepción macroscópica.

^{*}MUA: Multi-Unit Abutments - Pilares Multi Unit

^{**}Agabiti I, Apaza Alccayhuaman KA, Nakajima Y, Botticelli D. An enigmatic soft tissue creeping phenomenon: The spontaneous peri-implant mucosa margin and papilla growth. A retrospective clinical study. Clin Exp Dent Res. 2020;1-10. <https://doi.org/10.1002/cre2.380>.

^{***}Los implantes con un diámetro de 2,75 mm están diseñados para restauraciones unitarias en espacios reducidos del sector incisal.

3

ESCANEADO DE IMPLANTES EN FLUJO DIGITAL

- ✓ **Optimiza** tu flujo digital, mejora la comunicación con tus pacientes y **acelera la planificación de tus casos.**
- ✓ Toma impresiones **fácilmente** con el escáner intraoral.
- ✓ **Utiliza** un solo scanbody MUA* para todos los diámetros de implantes.

Utiliza un solo scanbody MUA para todos los diámetros de implantes.


Realiza piezas protésicas perfectamente adaptadas a la morfología de tu paciente.

*MUA: Multi-Unit Abutments - Pilares Multi unit



EL ARTE DE LA CIRUGÍA GUIADA ACCESIBLE PARA TODOS

Biotech Dental combina el rendimiento del implante Kontakt™ MB con la tecnología NemoScan para brindarte un **acceso fácil a la cirugía guiada.**

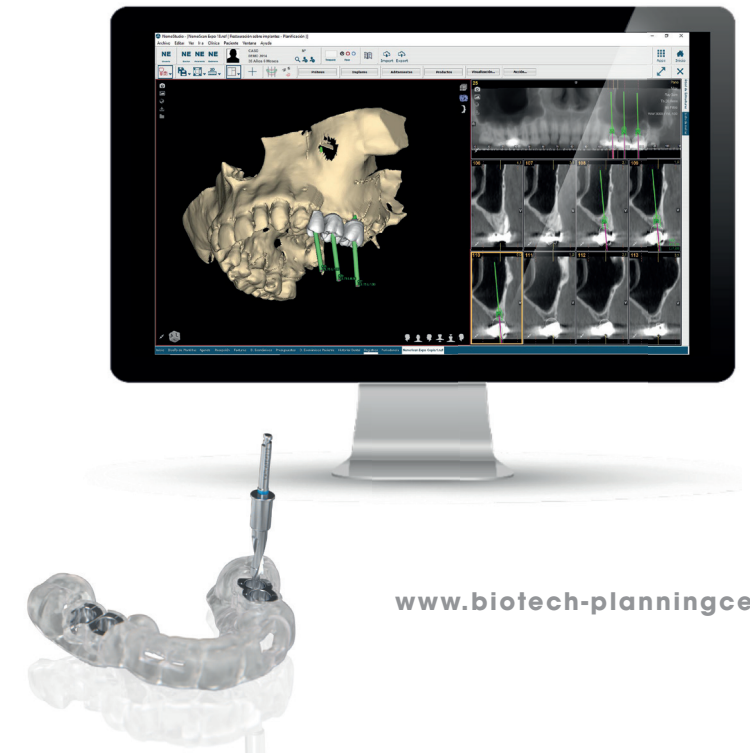

www.biotech-planningcenter.com

*MUA: Multi-Unit Abutments - Pilares Multi Unit

Kontakt™ MB

4

UN ÚNICO KIT QUIRÚRGICO PARA TODOS LOS IMPLANTES DE LA GAMA KONTACT™

Toda la gama de implantes Kontakt™ utiliza un único kit quirúrgico simple y ergonómico.



5

UNA GAMA PROSTÉTICA COMPLETA CON MUA* COMPACTOS Y EFICIENTES

✓ Producción de prótesis atornilladas

- **Prótesis única MUA*** con pilares indexados: PEEK provisional, mixta, de titanio o fundible.
- **Prótesis MUA*** múltiple con pilares no indexados: fundible, mixta o de titanio.

✓ Impresión digital o convencional con cubeta abierta

✓ Producción de prótesis atornilladas

Prótesis MUA* múltiple con pilares no indexados: fundible, mixta o de titanio



GAMA DE IMPLANTES KONTACT™ MB

		Longitud (mm) / Altura gingival (mm)									
cuerpo Ø (mm)		6 / 1.8	6 / 2.8	8 / 1.8	8 / 2.8	10 / 1.8	10 / 2.8	12 / 1.8	12 / 2.8	14 / 1.8	14 / 2.8
	Ø 2.75			 K2708-18MB	 K2708-28MB	 K2710-18MB	 K2710-28MB	 K2712-18MB	 K2712-28MB	 K2714-18MB	 K2714-28MB
	Ø 3.6			 K3608-18MB	 K3608-28MB	 K3610-18MB	 K3610-28MB	 K3612-18MB	 K3612-28MB	 K3614-18MB	 K3614-28MB
	Ø 4.2	 K4206-18MB	 K4206-28MB	 K4208-18MB	 K4208-28MB	 K4210-18MB	 K4210-28MB	 K4212-18MB	 K4212-28MB	 K4214-18MB	 K4214-28MB
	Ø 4.8	 K4806-18MB	 K4806-28MB	 K4808-18MB	 K4808-28MB	 K4810-18MB	 K4810-28MB	 K4812-18MB	 K4812-28MB	 K4814-18MB	 K4814-28MB
	Ø 5.4	 K5406-18MB	 K5406-28MB	 K5408-18MB	 K5408-28MB	 K5410-18MB	 K5410-28MB	 K5412-18MB	 K5412-28MB	 K5414-18MB	 K5414-28MB

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



BIOTECH DENTAL



Avenida Juan Caramuel, 1 -
Parque Científico Leganés Tecnológico, 28919 Madrid

Tel.: +33 (0)4 90 44 60 60

info-spain@biotech-dental.com

www.biotech-dental.com

www.biotechgalaxy.com



AFNOR Cert. 73017

Responsable: Biotech Dental Spain S.L. / B87313334 / Avenida Juan Caramuel 1, 28919 Leganés, Madrid / info-spain@biotechdental.com / 911930210 | Finalidad principal: Gestionar la relación comercial/profesional. Atender las consultas o la información que nos solicita. | Derechos: Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan. | Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra política de privacidad en <http://www.biotech-dental.com/es> o escribiendo al correo electrónico info-spain@biotechdental.com | Confidencialidad: Si Ud. no es el destinatario y recibe este mail/fax por error, rogamos se ponga en contacto con nosotros y destruya de inmediato el mail/fax por error recibido con todos sus documentos adjuntos sin leerlos ni hacer ningún uso de los datos que en ellos figuren, ateniéndose a las consecuencias que de un uso indebido de dichos datos puedan derivarse.