

smilers®
BY BIOTECH DENTAL



RETENEDOR PREMIUM HECHO
A MEDIDA

EL PODER DE SONREÍR

1


Fase



ALINEADORES TRANSPARENTES
Alineación dental Smilers®

2

Fase

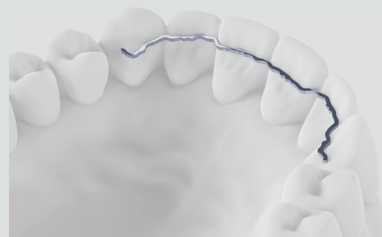

RETENCIÓN
Fase de estabilización

RETENCIÓN DESPUÉS DE UN TRATAMIENTO DE ORTODONCIA

El uso de un retenedor después del tratamiento con alineadores ayuda a mantener la nueva posición de los dientes y a proteger la nueva sonrisa del paciente.



MEMOTAIN® - RETENCIÓN DISEÑADA PARA DURAR

MEMOTAIN®, diseñado y fabricado digitalmente, combina un ajuste óptimo con la máxima comodidad.



Fabricado de Nitinol, una aleación con memoria de forma, MEMOTAIN® ofrece una alta resistencia a la fractura.



La fabricación precisa asistida por ordenador asegura un retenedor personalizado que se adapta perfectamente a la anatomía del paciente.



El alisado selectivo en el área interdental mejora la estabilidad del dispositivo en la boca del paciente.



Las microrretenciones aseguran una adhesión óptima en las áreas de cementado.



El electropulido proporciona a MEMOTAIN® una superficie lisa para una mayor **comodidad e higiene**.



Suministrado con una llave de transferencia, **es fácil y preciso** de colocar.

Riesgo mínimo de rotura
Con una tasa de rotura del 1%*,
MEMOTAIN® proporciona una mayor
durabilidad

Ultrafino
Grosor de 0,4 mm x 0,4 mm

**Aleación de Nitinol con
memoria de forma**
Diseñado para durar, el retenedor
MEMOTAIN® asegurará el
mantenimiento de la nueva sonrisa
del paciente

Confort óptimo para el paciente

Higiene bucal más fácil
gracias a su diseño liso y áreas de
cementado optimizadas

Ajuste personalizado
para una perfecta adaptación a
la anatomía del paciente

MAYOR PRECISIÓN QUE EL RETENEDOR TRADICIONAL

Gracias a un innovador proceso de fabricación, MEMOTAIN® está diseñado para un ajuste perfecto y, con un grosor de 0,4 mm x 0,4 mm, es mucho más fino que otros alambres de retención.

MÁXIMA ESTABILIDAD - - SOLO 1% DE TASA DE ROTURA

MEMOTAIN® está fabricado en Nitinol, una aleación con memoria de forma de alta calidad que destaca por su gran estabilidad. Con una tasa de rotura de tan solo un 1%*, es mucho más fiable que los retenedores convencionales, los cuales pueden tener una tasa de rotura de hasta un 10%.



FÁCIL DE USAR

Suministrado con una llave de transferencia, la colocación es simple y directa.

CONFORT DE USO ÓPTIMO **Y AJUSTE PERFECTO**

El proceso de fabricación digital, combinado con las características innovadoras de MEMOTAIN® 2.0, puede reproducir las estructuras más finas. Esto asegura un ajuste perfecto y hace que el retenedor sea particularmente cómodo de llevar.

*fuente: estudio llevado a cabo por el centro estadístico de SCHEU DENTAL custom-made GMBH en 30.000 retenedores

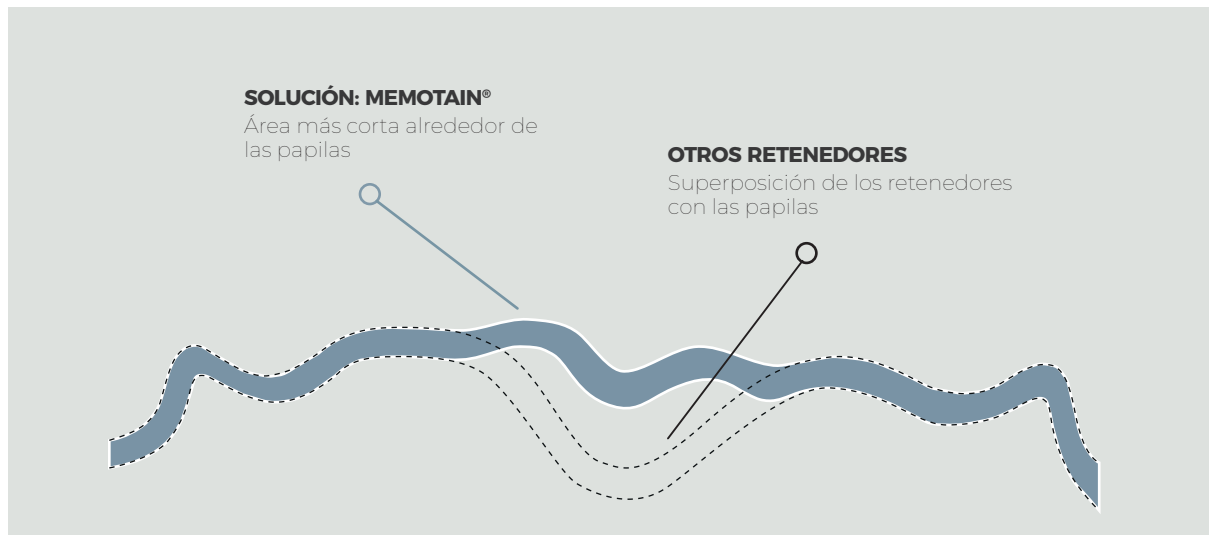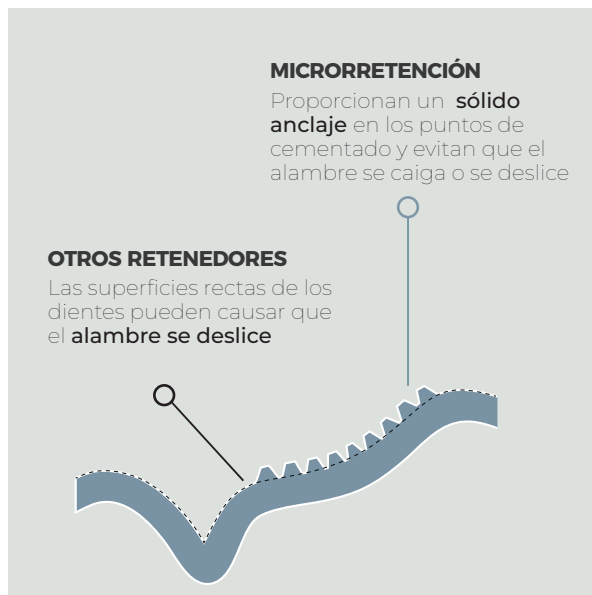

¿POR QUÉ **MEMOTAIN®**?

LA **PRECISIÓN** SE UNE A LA **COMODIDAD**

1

ESTABILIDAD Y DURABILIDAD

Alambre de Nitinol, una aleación con memoria de forma para una mayor durabilidad

2

PRECISIÓN Y COMODIDAD

Diseño y fabricación asistidos por ordenador para un ajuste mejorado

3

SIMPLICIDAD Y EFICIENCIA:

Cementado indirecto utilizando una llave de transferencia, para un posicionamiento preciso

4

HIGIENE Y SEGURIDAD:

Superficie lisa gracias al electropulido para una mayor comodidad e higiene

smilers

Biotech Dental Smilers

305, Allées de Craponne
13300 Salon-de-Provence
Francia

+33 (0)4 13 22 82 40

CustomerService@smilers.com

 Smilers_Aligners



SCHEU DENTAL


SCHEU-DENTAL custom-made GmbH

Walder Str. 53, 40724 Hilden

Alemania

Tel. (+49) 2104 80041-00

Fax. +49 2104 80041-99

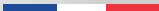
www.smilers.com

Fabricado por CA Digital GmbH, Alemania. Lea atentamente las instrucciones de uso (IFU). Sin reembolso por parte de la seguridad social francesa. Dispositivos médicos personalizados de Clase IIa (SMILERS: alineadores hechos a medida), dedicados a la implantología dental. Fabricante: Biotech Dental Smilers. Lea atentamente las instrucciones de uso (IFU). Sin reembolso por parte de la seguridad social francesa.

Biotech Dental Smilers - 305, Allées de Craponne - 13300 Salon de Provence - Francia.

Una sociedad por acciones simplificada (S.A.S.) con un capital de 125.000 € - Registro Mercantil y de Sociedades de Salon de Provence: 801 674 375 - SIRET: 801 674 375 00010 - N.º de IVA: FR 93 80 167 437 5. Imágenes no contractuales. No tirar en la vía pública. Impreso por VALLIERE - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC des Molières - Miramas - Francia.

Fabricante de MEMOTAIN - Dispositivo médico de Clase IIa, diseñado para prevenir el movimiento dental después del tratamiento de ortodoncia.